



راهیان
طب صبا **RTS**

شرکت راهیان طب صبا با هدف خدمت به جامعه پزشکی در زمینه تولید ابزار جراحی جنرال و تخصصی و واردات و توزیع تجهیزات پزشکی، بیمارستانی و محصولات سلامت خانواده فعالیت میکند. همچنین این مجموعه به عنوان یک واحد تحقیقات علمی، در زمینه تجهیزات پزشکی توانسته است با بهره گیری از کادری مجرب و متخصص، تمرکز خود را جهت عرضه محصولات با کیفیت و دارای استانداردهای بروز و جهانی معطوف نماید.

شرکت راهیان طب صبا دارای گواهینامه‌های مدیریت کیفیت ISO13485:2003 و تأییدیه اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد. علاوه بر این شرکت با داشتن نمایندگی انحصاری از شرکتهای معتبر دنیا اعم از کمپانی STRYKER آمریکا جهت هتلینگ بیمارستان، کمپانی KaWe آلمان جهت کلیه محصولات تخصصی و تشخیصی بیمارستانی، کمپانی ACCUMED / ROSSMAX سوئیس جهت محصولات سلامت خانواده و صندلی‌های ماساژ، طیف وسیعی از نیاز مشتریان را پوشش می‌دهد و مفتخر است با همکاری نمایندگان توزیع و فروش در سراسر کشور با ارائه خدمات گسترده و به موقع در جهت بهبود روزافزون سلامت جامعه گام بردارد.

شماره تماس : ۰۲۱- ۴۰۸۸۰۵۳۶-۹

MEDIZINTECHNIK
seit 1890

KaWe
GERMANY

competence in medical technology
worldwide



130

YEARS
1890-2020

جنرال کاتالوگ محصولات کاو

راهیان
طب صبا **RTS**

WWW.RAHYANTEB.COM

شرکت KaWe یکی از بزرگترین تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی آلمانی در جهان است که محصولات آن بر اساس استانداردهای تخصصی جهانی طراحی شده اند، محصولات همواره منطبق بر فناوری روز دنیا می باشند.

همچنین به منظور حفظ امنیت بیماران و کاربران در کل مراحل تولید، فرآیند مدیریت ریسک بر اساس استاندارد بین المللی DIN EN ISO 14071 اجرا می شود، بنابراین تمامی محصولات سازگار با استاندارد 17664 ENISO هستند.

این شرکت دارای کلیه استانداردهای مرتبط مانند EN ISO 9001 به همراه EN 13485 ISO و گواهینامه CE جهت عرضه محصولات با بهترین کیفیت به همراه اصل رضایت مندی مشتری می باشد. کمپانی KaWe دارای قدمتی طولانی با بیش از ۱۳۰ سال سابقه فعالیت در عرصه تولید تجهیزات پزشکی می باشد. مدیریت ۴ نسل از افراد با تجربه و کاردان همواره باعث رشد و پیشرفت روز افزون این کمپانی بوده و منجر به تولید محصولات با بهترین کیفیت شده است. KaWe همیشه در راستای پیشرفت و توسعه قدم برداشته و از زمان تأسیس تا به امروز با ارائه بهترین محصولات پاسخگوی تمامی نیازهای مشتریان در سرتاسر دنیا بوده است. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت یا نشانی www.rahyanteb.com مراجعه کنید.



KaWe PRESTIGE



استیل ضد زنگ

- دارای هد دو طرفه برای شنیدن صدا با گستره های فرکانسی مختلف
- انتقال صدا با بهترین کیفیت و بیشترین سرعت
- دارای دو سرگوشی با قابلیت تنظیم
- وزن استاندارد: ۱۸۳ g - وزن گوشه اطفال: ۱۳۷ g - وزن گوشه نوزادان: ۱۲۸ g
- یک دیافراگم یدک



- ویژگی قطعه قفسه سینه:
- استیل ضد زنگ
- قابلیت بازیافت
- طول تیوپ: ۷۸ cm
- بکارگیری سسیلیکون مختص مصارف پزشکی با خاصیت زیست سازگاری با کیفیت بالا در قسمت دیافراگم و بل

قسمت سری
به همراه تیوپ REF:06.94270.021

استاندارد
قطر: ۴۴ mm

REF:06.22700.022

مخصوص اطفال
قطر: ۳۵ mm

REF:06.22702.022

مخصوص نوزادان
قطر: ۲۸,۵ mm

REF:06.22701.022

KaWe PRESTIGE LIGHT



گوشی پزشکی

- جنس آلومینیوم
- دارای هد دو طرفه برای شنیدن صداها با فرکانس های مختلف
- انتقال صدا با بهترین کیفیت و بیشترین سرعت
- دارای دو سرگوشی با قابلیت تنظیم
- یک دیافراگم یدک
- وزن استاندارد: ۱۲۴ g
- وزن گوشه اطفال: ۱۰۵ g
- وزن گوشه نوزادان: ۱۰۲ g



- ویژگی قطعه قفسه سینه:
- جنس از آلومینیوم قابل بازیافت
- طول تیوپ: ۷۸ cm
- به کارگیری سیلیکون
- مختص مصارف پزشکی با خاصیت زیست سازگاری
- با کیفیت بالا در قسمت دیافراگم و بل

استاندارد
قطر: ۴۴ mm

REF:06.22710.022

مخصوص اطفال
قطر: ۳۵ mm

REF:06.22712.022

مخصوص نوزادان
قطر: ۲۸,۵ mm

REF:06.22711.022

گوشی پزشکی

STETHOSCOPE

گوش دادن به صداهای بدن یکی از روشهای مهم تشخیص و درمان بیماری هاست. بنابراین درست شنیدن صدا به درمان و تشخیص سریعتر کمک شایان توجهی میکند. با توجه به اینکه بعضی از صداها در بدن بسیار آرام هستند، لذا لازم است که وسیله ی مورد نظر، دارای تقویت کننده بسیار قوی باشد. همچنین دستگاه باید قادر باشد تا گستره وسیعی از صداهای موجود در بدن را تشخیص داده و بدون هیچ گونه اتلافی به گوشه پزشکی منتقل کند. کمپانی KaWe بیشتر از ۶۰ سال در تولید انواع گوشه پزشکی پیشگام بوده و دارای واحدی مجزا برای تحقیق و توسعه بر روی این دستگاه می باشد. در حال حاضر دستگاهها با بالاترین دقت و بهترین کیفیت مطابق با به روزترین فناوریها در انواع مختلف وجود دارند.



KaWe FLAT-HEAD PLANO گوشه پزشکی یک طرفه



- مناسب برای استفاده روزانه پزشکان و پرستاران
- تنظیم راحت برای هر نوع کاف اندازه گیری فشار خون
- دیافراگم حساس و ساخته شده از فایبر گلاس با کیفیت بالا
- بل ساخته شده از فلز با خاصیت رسانایی بالا برای اصوات
- دارای رنگ های متنوع و مختلف
- دیافراگم با قطر mm ۴۳/۸
- طول دستگاه: cm ۷۸
- سبک وزن: g ۹۹

- REF:06.10100.034
- REF:06.10100.014
- REF:06.10100.124
- REF:06.10100.044
- REF:06.10100.024
- REF:06.10100.094
- REF:06.10100.054
- REF:06.10100.134

KaWe DOUBLE STETHOSCOPE دوطرفه آلومینیومی



- سبک وزن
- دارای هد دو طرفه برای شنیدن صدا با گستره های فرکانسی مختلف
- قسمت مربوط به قفسه سینه (ساخته شده از آلومینیوم)
- ساخته شده از مواد قابل بازیافت
- دارای دیافراگم با قطر mm ۴۳/۸
- سبک وزن: g ۱۰۲

- REF:06.22300.032
- REF:06.22300.022
- REF:06.22300.012

KaWe SINGLE STETHOSCOPE یک طرفه آلومینیومی



- قطعه مربوط به قفسه سینه ساخته شده از آلومینیوم
- دارای هد یک طرفه برای شنیدن صدا
- دیافراگم با قطر mm ۴۳/۸
- طول دستگاه: cm ۸۰
- سبک وزن: g ۸۴

- REF:06.22300.032
- REF:06.22300.022
- REF:06.22300.012

KaWe COLORSCOP PLANO گوشه پزشکی رنگی



- گوشه پزشکی یک طرفه در رنگهای مختلف
- دارای دیافراگم با قطر mm ۴۳/۸
- طول: cm ۷۸
- وزن: g ۹۹

- REF:06.93154.031
- REF:06.93154.011
- REF:06.93154.121
- REF:06.93154.091
- REF:06.93154.021
- REF:06.93154.041
- REF:06.93154.051
- REF:06.93154.131

Ear Tips
Black

REF:06.91120.021

Y-Tube Piece
Black

REF:06.99020.021

Head Piece, Small
Black

REF:06.92100.001

KaWe RAPPORT گوشه پزشکی



- دارای هد دو طرفه و دو رو
- دارای دیافراگم با قطر mm ۴۰
- طول: cm ۷۲
- شامل قطعات جداگانه
- وزن: g ۲۱۶

- REF:06.22500.012
- REF:06.22500.042
- REF:06.22500.022
- REF:06.22500.092
- REF:06.22500.032

• قطعات جداگانه:



- 2 pairs of ear tips
- 3 attachment funnels, 19.5 / 26.0 / 33.0 mm
- 2 diaphragms
- 1 wrench

KaWe PLANET

گوشی پزشکی فوق تخصص قلب

- برخوردار از استحکام کامل در قسمت مربوط به قفسه سینه با وزن ۱۴۵kg
- وجود ۲۳mm ساختار مسطح در قطعه قفسه سینه که بهترین رزونانس را برای شنیدن صدای ضعیفترین صداهای موجود در بدن
- عدم وجود هر گونه صدای اضافه و اغتشاش مزاحم ناشی از خود دستگاه
- دارای دیافراگم نوسان ساز با قطر ۴۲mm و عملکرد بالا برای شنیدن ضعیفترین صداهای موجود در بدن
- قابل انعطاف و قابلیت تعویض بل برای صداهای اصلی
- دارای سیستم دو مجرای در داخل تیوب برای تولید و انتقال صدا با بهترین کیفیت
- استفاده از مواد با کیفیت و قابل بازیافت
- قابلیت چرخش سرهای گوشی
- عدم ورود و خروج هوا از دستگاه
- دارای طول ۷۵ cm
- وزن کلی ۲۸۲ g

REF 06.22900.022



سرهای گوشی
با قطر ۵٫۵ mm



REF 06.91111.021

تیوب



REF 06.93265.021

قطعه مربوط به قفسه سینه
با قطر ۵٫۵ mm



REF 06.95290.001

دیافراگم
با قطر ۴۲ mm



REF 06.96290.001

KaWe PLANET AIR

گوشی پزشکی آلومینیومی

- آلومینیوم ضد زنگ، بدون نیکل
- سبک وزن: ۱۸۴ g
- دارای آگوستیک عالی برای شنیدن بازه وسیعی از فرکانس‌ها
- دارای دیافراگم با قطر ۴۲ mm برای شنیدن نوسان های ریز
- دارای گوشی های نرم و بسیار راحت برای قراردادن در گوش

قطعات پدک:

- ear tips, screw-on (۴ pcs. in box)
- name plate

REF 06.22910.122



KaWe PROFI CARDIOLOGY

تخصصی قلب

- کارکرد عالی، مطابق با به روزترین فناوری ها
- دارای گوشی های نرم و بسیار راحت برای قراردادن در گوش
- دارای هد دو طرفه برای شنیدن صداهای با فرکانس های مختلف، موجود در رنگ های متنوع
- دارای دو گوشی اضافه قابل تنظیم با قفسه سینه (chest piece) ساخته شده از استیل ضد زنگ
- دارای دیافراگم با قطر ۴۵ mm
- ساخته شده از مواد قابل بازیافت
- انتقال صدا به صورت تک تیوبی با کیفیت و وضوح بالا
- وزن: ۲۱۹ g



KaWe Profi Cardiology Stethoscope



REF 06.22800.022

REF 06.22800.172

هد به همراه تیوب
طول ۶۰ cm



REF 06.94280.021

REF 06.94280.171

سرهای گوشی
نرم و پیچشی



REF 06.91229.021

KaWe TOP CARDIOLOGY

گوشی پزشکی تخصصی قلب

- مناسب برای استفاده متخصصان قلب و عروق
- دارای هد یک طرفه با سطح صاف برای شنیدن صدا
- جنس از استیل ضد زنگ و فراهم آوردن صدا با بهترین و بالاترین کیفیت
- دارای دیافراگم با قطر ۴۵ mm
- طول دستگاه ۶۴ cm وزن: ۲۱۰ g
- دارای سیستم تک تیوبی برای انتقال صدا به بهترین شکل
- دارای قطعات پدک:
- یک دیافراگم پدک
- دو سر گوشی نرم اضافه با قابلیت تنظیم



KaWe Flat Head Stethoscope



REF:06.10800.022

REF:06.10800.172

هد به همراه تیوب
طول ۶۰ cm



REF:06.94280.021

REF:06.94280.171

سرهای گوشی
نرم و پیچشی



REF:06.91220.021

KaWe MASTERMED A

A1 / A1+

- دارای یک تیوپ اندازه گیری برای انتقال صدا با بهترین کیفیت
- مشکی رنگ
- دارای کاف در ۴ سایز، اطفال، بزرگسال (M) و بزرگسال (L)
- با خاصیت زیست سازگاری بالا و مطابق با استاندارد ۱۰۹۹۳ DIN EN ISO
- دارای نایلون فابریک ۷۰D برای تمیز کردن راحت
- بدون لاتکس
- مقاومت بالا برای استفاده ی بیشتر از ۵۰۰۰۰ بار

حلقه پلاستیکی

REF 04.11134.232



دستگاه فشار سنج



REF: 04.11144.232

A2 / A2+

- دارای یک تیوپ اندازه گیری برای انتقال صدا با بهترین کیفیت
- مشکی رنگ
- دارای کاف در ۴ سایز، اطفال، بزرگسال (M) و بزرگسال (L)
- با خاصیت زیست سازگاری بالا و مطابق با استاندارد ۱۰۹۹۳ DIN EN ISO
- دارای نایلون فابریک ۷۰D برای تمیز کردن راحت
- بدون لاتکس
- مقاومت بالا برای استفاده ی بیشتر از ۵۰۰۰۰ بار

حلقه پلاستیکی

REF 04.12134.232



REF: 04.12144.232

A1/A1+



کاف بزرگسال (L)
۳۵٫۵-۴۴cm

REF:04.85104.241



کاف بزرگسال (M)
۲۷٫۵-۳۶٫۵cm

REF:04.85104.231



کاف اطفال
۲۰٫۵-۲۸٫۵cm

REF:04.85104.221



کاف نوزاد
۱۳٫۸-۲۱٫۵ cm

REF:04.85104.211

A2/A2+



کاف بزرگسال (L)
۳۵٫۵-۴۴cm

REF:04.85204.241



کاف بزرگسال (M)
۲۷٫۵-۳۶٫۵cm

REF:04.85204.231



کاف اطفال
۲۰٫۵-۲۸٫۵cm

REF:04.85204.211



کاف نوزاد
۱۳٫۸-۲۱٫۵ cm

REF:04.85204.211

فشار خون سنج

BLOOD PRESSURE

تمامی دستگاه های فشار سنج KaWe دارای استانداردهای تجهیزات پزشکی EEC/۴۲/۹۳ و استاندارد تخصصی DIN EN ISO۸۱۰۶۰ هستند. استفاده از این تولیدات بسیار راحت و آسان بوده به شکلی که همه ی افراد قادر به استفاده از آن می باشند. گستره ی وسیعی از دستگاه های فشار خون در این کمپانی طراحی، تولید و توزیع می شوند که از جمله آن ها می توان به نوع دیواری، رومیزی و پایه دار اشاره کرد. به علاوه نوع دیگری در ترکیب با ست Med-Center وجود دارد که از نوع دیواری بوده و یکی از دستگاه های کامل تشخیص دارد که از نوع دیواری بوده و یکی از دستگاه های کامل تشخیصی در مراکز درمانی به شمار می رود.



اتوسکوپ یک وسیله است که می توان به کمک آن یک معاینه کامل گوش را انجام داد. به کمک اتوسکوپ می توان مجرای گوش خارجی و پرده صماخ را مشاهده نمود و از سلامت یا جراحت آن آگاه شد.

این دستگاه از یک دسته و یک سر تشکیل شده است. دسته حاوی یک منبع الکتریکی تولید نور و سر حاوی یک عدسی با قدرت بزرگنمایی کم می باشد. اتوسکوپها می توانند بدون نیاز به کارگذاری اسپکولوم و به صورت جداگانه برای معاینه بینی نیز مورد استفاده قرار گیرند.

به کارگیری تکنولوژی لامپهای LED در این دستگاه به تشخیص بیماریهای مربوط به گوش کمک شایان توجهی کرده است. لامپ های LED به کار رفته در اتوسکوپهای KaWe بسیار کم مصرف بوده و بیشترین شدت تابش را نسبت به ورودی دستگاه برای کاربر فراهم می آورند. این لامپها در مقابل ضربه و ارتعاش مقاوم بوده و با جلوگیری از گرم شدن بیش از حد دستگاه، باعث بالا بردن عمر آن می شوند. بنابراین دستگاه با عملکردی عالی در تشخیص و با قیمتی اقتصادی و مقرون به صرفه عرضه می گردد.

اتوسکوپ های KaWe EUROLIGHT ساخته شده از فلز با کیفیت بالا، با دوام و مقاوم بوده و دارای عمر طولانی هستند. این دستگاه با استفاده از تکنولوژی انتقال نور به روش فیبرهای نوری از طریق لامپ هایی با ظرفیت بالا ماند لامپ زنون یا روشنایی استاندارد تشخیص های مورد نظر را انجام می دهد. در این روش ها هیچ نوری از پرده و کانال گوش بازتاب نشده و تشخیص با نهایت دقت صورت می گیرد. میزان نور تابشی توسط رنوستات قابل تنظیم بوده (به جز نوعی که دارای لامپ LED است). بعلاوه اینکه دستگاه دارای قابلیت تنظیم بزرگنمایی می باشد.



KaWe
MASTERMED C

دستگاه فشار سنج پایه دار

- دارای پایه قابل چرخش با ارتفاع ۱٫۵ m ساخته شده از استیل با کیفیت بالا و ضد زنگ، استفاده از پلاستیک محکم و بادوام در انتهای پایه و چرخها
- قابلیت تنظیم ارتفاع از ۱۳۰ m تا ۸۵ m

- دارای چرخهای دوتایی روان و راحت با قطر ۵۰ mm شامل:
- ۲ عدد چرخ دارای ترمز
- ۲ عدد چرخ برای حفظ تعادل و امنیت دستگاه
- ۱ عدد چرخ برای جلوگیری از اثرات به وجود آمده ناشی از الکتریسیته ساکن به منظور بالا بردن دقت اندازه گیری
- دارای شلنگ حلقه ای شکل به طول ۳ m

REF: 04.32740.232

دستگاه فشار سنج مدل رومیزی

- دارای دسته و پایه های مخصوص برای جلوگیری از ضربه و خش
- وجود شلینگ مارپیچی با طول حدود ۳m



REF:04.32730.232

دستگاه فشار سنج مدل دیواری

- قطر صفحه ای اندازه گیری ۱۵۰ mm
- دارای دقت بالای اندازه گیری از ۰ تا ۳۰۰ mmHg
- قابلیت چرخش تا ۸۰ درجه
- قابل استفاده با مدل KaWe Center 5000 دیواری
- قابل تبدیل به مجموعه کامل تشخیصی
- شامل تمامی لوازم جانبی برای نصب
- شلنگ مارپیچ به طول ۳m



REF: 04.32750.232

KaWe COMBILIGHT



- اتصال با یک کلیک
- دارای لامپ (2,5 و 3,5) و تکنولوژی انتقال نور با استفاده از فیبرهای نوری
- دارای تکنولوژی لامپ های (زنون، خلا و LED)
- دسته فلزی و قابلیت استفاده از باتری قابل شارژ درون دسته
- قابلیت تنظیم نور توسط رئوستات
- دارای پروب های یکبار مصرف برای گوش در اندازه های ۱۰x۲/۵ mm و ۱۰x۴ mm
- به همراه کیف زیپ دار
- دارای دو باتری

- لامپ LED دارای تکنولوژی انتقال نور با استفاده از فیبرهای نوری
- شدت روشنایی بالا و نزدیک به ۴۲۰۰ Lux (در فاصله ۱۵ mm)
- دارای لامپ با عمر طولانی ۵۰۰۰۰ h

FO XL REF 01.12330.001

FO LED REF 01.12530.002 VL REF 01.12110.001

KaWe EUROLIGHT



- اتصال با یک کلیک
- دارای لامپ (2,5 و 3,5) و تکنولوژی انتقال نور با استفاده از فیبرهای نوری
- دارای تکنولوژی لامپ های (زنون، خلا و LED)
- دسته فلزی و قابلیت استفاده از باتری قابل شارژ درون دسته
- قابلیت تنظیم نور توسط رئوستات
- دارای پروب های یکبار مصرف برای گوش در اندازه های ۱۰x۲/۵ mm و ۱۰x۴ mm
- به همراه کیف زیپ دار
- دارای دو باتری

FO XL REF 01.11330.001

FO LED REF 01.11530.002 VL REF 01.11110.001

TYPES OF ILLUMINATIONS



- تکنولوژی فیبرهای نوری F.O.
- LED / XENON
- لامپ LED / زنون 2.5V, 3.5V
- تعویض راحت و آسان لامپ
- فیبرهای نوری با کیفیت بالا



- روشنایی استاندارد C
- تابش استاندارد با لامپ خلا 2.5V



LED

KaWe PICCOLIGHT



- روشنایی استاندارد
- لامپ خلا
- دارای باتری قلمی در دسته دستگاه
- دارای پروب های یکبار مصرف برای گوش در اندازه های ۱۰x۲/۵ mm و ۱۰x۴ mm
- به همراه کیف پارچه ای
- دارای دو باتری

REF 01.13100.021

REF 01.13100.232 REF 01.13100.262

FO XL

- تابش نور دستگاه با به کارگیری تکنولوژی فیبرهای نوری
- استفاده از فیبرهای نوری با کیفیت بالا
- دارای لامپ زنون 2.5 V
- دارای میدان دید گسترده
- دارای باتری قلمی در دسته دستگاه
- دارای پروب های یکبار مصرف برای گوش در اندازه های ۱۰x۲/۵ mm و ۱۰x۴ mm
- به همراه کیف پارچه ای
- دارای دو باتری

REF 01.13300.021

REF 01.13300.232 REF 01.13300.262

FO LED

- روشنایی با تکنولوژی فیبرهای نوری و چراغ LED با نور استاندارد
- شدت روشنایی بالا و نزدیک به ۴۲۰۰ Lux در فاصله ۱۵ mm
- دارای لامپ LED با عمر طولانی ۵۰۰۰۰ h
- ضربه گیر و ذخیره کننده انرژی
- دارای باتری در دسته دستگاه
- دارای پروب های یکبار مصرف برای گوش در اندازه های ۱۰x۲/۵ mm و ۱۰x۴ mm
- به همراه کیف پارچه ای
- دارای دو باتری

REF 01.13500.021

REF 01.13500.262 REF 01.13500.232

KaWe PICCOLIGHT XL



REF 01.23561.021

REF 01.23561.261 REF 01.23561.231

PICCOLIGHT E56 LED

REF 01.28561.021

REF 01.28561.261 REF 01.28561.231

- افتالموسکوپ قلمی (جیبی)
- خاموش شدن اتوماتیک با قراردادن در جیب
- دارای حلقه فلزی در محل اتصال کلیکی سر به بدنه جهت استحکام بیشتر
- باتری درون دسته دستگاه
- لامپ زنون / هالوژن ۲/۵۷
- قابلیت تنظیم لنز از -۲۰ تا +۲۰ درجه
- دارای لنز مناسب به منظور افزایش وضوح تصویر و تشخیص صحیح
- دارای ۶ دیافراگم (فیلتر سبز رنگ EU)
- به همراه کیف پارچه ای

KaWe PICCOLIGHT XL



REF 01.23500.021

REF 01.23500.261 REF 01.23500.231

- افتالموسکوپ قلمی (جیبی)
- خاموش شدن اتوماتیک با قراردادن در جیب
- دارای حلقه فلزی در محل اتصال کلیکی سر به بدنه جهت استحکام بیشتر
- باتری درون دسته دستگاه
- لامپ زنون / هالوژن ۲/۵۷
- قابلیت تنظیم لنز از -۲۰ تا +۲۰ درجه
- دارای لنز مناسب به منظور افزایش وضوح تصویر و تشخیص صحیح
- دارای ۱ دیافراگم
- به همراه کیف پارچه ای

افتالموسکوپ

OPHTHALMOSCOPE



برای ارزیابی سلامت شبکیه و زجاجیه چشم، افتالموسکوپ ابزاری بسیار مهم محسوب می‌شود. در معاینه ته چشم با افتالموسکوپ، تورم دیسک اپتیک یا papilledema به ویژه در بیماران مبتلا به سردرد، علامتی کلیدی به‌شمار می‌آید. این علامت می‌تواند نشانگر افزایش در فشار درون جمجمه (ICP) به دلیل عواملی چون ازدیاد غیرعادی مایع درون مغزی، افزایش خوش خیم فشار درون جمجمه، یا تومور مغز باشد. معاینات منظم چشم به وسیله افتالموسکوپ در بیماران مبتلا به دیابت (هر ۶ ماه تا ۱ سال) برای تشخیص زودهنگام رتینوپاتی دیابتی اهمیت خاصی دارد.

افتالموسکوپ‌های تولید شده در این کمپانی به پزشک کمک میکنند که مساحت زیادی از چشم و عمق آن را با دقت بالایی مشاهده و بررسی کنند. تکنولوژی منحصر به فرد به کار رفته در افتالموسکوپ KaWe باعث بالا بردن صحت و دقت تشخیص پزشک شده و با میدان دید گسترده‌ای که دارد امکان مشاهده تمامی لایه‌های چشم را فراهم می‌آورد. تعداد دیافراگم‌های تعبیه شده بر روی این دستگاه و نوع شارژ آن‌ها بسته به مدل دستگاه متفاوت خواهد بود.



دستگاه‌های موجود در این مجموعه دارای دسته‌های ارگونومیک بوده و نور خروجی توسط یک دریچه تنظیم می‌شود. این دستگاه مجهز به سیستم ضد سرقت بوده و به این صورت از استفاده غیرمجاز، جلوگیری به عمل می‌آورد. مدل دیواری MasterCenter 5000 ترکیبی از کیفیت، تکنولوژی بالا و استفاده آسان است.

KaWe EUROLIGHT XL



- اتصال با یک کلیک
- لامپ زنون / هالوژن ۷۲/۵
- دسته فلزی و دو باتری قلمی درون دسته دستگاه و قابلیت استفاده از باتری قابل شارژ
- قابلیت تنظیم نور توسط رلوسات
- قابلیت تنظیم لنز از ۲۰- تا ۲۰+ درجه
- به همراه کیف زیپ دار
- دارای ۶ دیافراگم (نوع EU- فیلتر سبز رنگ / نوع US- فیلتر سبز رنگ و آبی رنگ)

REF 01.21366.001

KaWe EUROLIGHT LED



- اتصال با یک کلیک
- لامپ LED ۷۲/۵
- دسته فلزی و دارای دو باتری قلمی درون دسته دستگاه
- میزان گرمی رنگ نور تابشی: ۵۰۰۰K
- توانایی بالا در تفکیک رنگ نورهای بازتاب شده به منظور تشخیص دقیقتر با CRI بیشتر از ۸۰
- دارای دقت بالای نوری
- امکان بررسی و مشاهده لایه های عمیق در چشم
- دارای ۵ دیافراگم

REF 01.24355.002



KaWe COMBLIGHT F.O.30LED / E36(EU)

اتوسکوپ مدل KAWE COMBLIGHT F.O.30LED / E36(EU)

- لامپ 2.5V LED
- قدرت روشنایی بالا
- با قدرت بزرگنمایی 3X به منظور افزایش دقت و صحت تشخیص
- ویژگی‌های دسته دستگاه:



REF 02.23004.001

- دارای یک دسته
- قابلیت تنظیم نور
- دارای باتری قلمی درون دسته
- اتصال با کلیک
- اندازه متوسط



لوازم جانبی

- دارای پروپ های یکبار مصرف برای گوش در اندازه‌های 10x2/5mm و 10x4mm
- به همراه جعبه ی سخت

افتالموسکوپ مدل COMBLIGHT E36

- لامپ زنون / هالوژن
- 6 دیافراگم ● فیلتر سبز رنگ
- قدرت روشنایی بالا
- قابلیت تنظیم لنز از -20 تا +20 درجه
- دارای لنز مناسب به منظور افزایش وضوح تصویر و تشخیص صحیح

KaWe PICCOLIGHT F.O/ E56 (EU)

اتوسکوپ مدل KAWE PICCOLIGHT F.O

- لامپ زنون
- قدرت روشنایی بالا
- با قدرت بزرگنمایی 3X به منظور افزایش دقت و صحت تشخیص
- ویژگی‌های دسته دستگاه:



REF 02.33404.022

REF 02.33405.022

- دارای 2 دسته
- دارای باتری قلمی درون دسته



لوازم جانبی

- دارای پروپ های یکبار مصرف برای گوش در اندازه های 10x2/5mm و 10x4mm
- به همراه جعبه ی سخت

افتالموسکوپ مدل PICCOLIGHT E50

- لامپ زنون / هالوژن
- 6 دیافراگم ● فیلتر سبز رنگ
- قدرت روشنایی بالا
- قابلیت تنظیم لنز از -20 تا +20 درجه
- دارای لنز مناسب به منظور افزایش وضوح تصویر و تشخیص صحیح

KaWe MASTERMED C

مدل دیواری دستگاه فشارسنج به همراه ست تشخیصی MedCenter5000

- دارای دقت بالا با دامنه اندازه گیری دستگاه فشار سنج تا 300 mmHg
- دارای صفحه با قطر 150 mm
- دارای تمامی وسایل جانبی برای نصب راحت و آسان
- قابلیت چرخش تا 80 درجه جهت رویت بهتر صفحه
- شلنگ ماریچ به طول 3 متر متصل به دستگاه

REF 04.32750.232



KaWe F.O.LED E56(EU)



REF02.85021.002

مدل دیواری، دو دسته و دو هد همراه با قابلیت تعویض کابل اصلی

اتوسکوپ، مدل KaWe PICCOLIGHT F.O

- لامپ LED با قدرت زیاد
- بزرگنمایی با قدرت 3X به منظور بالا بردن صحت و دقت تشخیص
- قابلیت انتقال روشنایی با استفاده از تکنولوژی فیبر نوری
- افتالموسکوپ، مدل KaWe PICCOLIGHT E56,EU
- لامپ هالوژن / زنون ● 6 دیافراگم
- فیلتر سبز رنگ ● قابلیت تنظیم لنز از -20 تا +20 درجه

KaWe COMBLIGHT F.O.30/E36 (EU)



اتوسکوپ مدل KAWE COMBLIGHT F.O30

- مدل زنون
- قدرت روشنایی بالا
- با قدرت بزرگنمایی 3X به منظور بالا بردن صحت و دقت تشخیص
- ویژگی‌های دسته دستگاه:
- قابلیت اتصال با کلیک
- قابلیت تنظیم نور
- دسته با اندازه متوسط با قابلیت استفاده از باتری قابل شارژ
- دارای 2 باتری



لوازم جانبی

- دارای پروپ های یکبار مصرف برای گوش در اندازه های 10x2/5mm و 10x4mm
- به همراه جعبه ی سخت

افتالموسکوپ مدل COMBLIGHT F.O30

- لامپ زنون / هالوژن
- 6 دیافراگم ● فیلتر سبز رنگ
- قدرت روشنایی بالا
- قابلیت تنظیم لنز از -20 تا +20 درجه
- دارای لنز مناسب به منظور افزایش وضوح تصویر و تشخیص صحیح

REF 02.23004.001

در هنگام عمل جراحی، معاینه و بررسی گلو و حنجره، اهمیت بسیاری دارد. بنابراین پزشکان و متخصصان بیهوشی به دستگاهی نیاز دارند که بتوانند در این مواقع به تشخیص آن اعتماد کنند. لارنگوسکوپ‌های KaWe این نیاز را مرتفع ساخته و با استفاده از فناوریهای روز دنیا، چراغ LED مخصوص و تکنولوژی انتقال نور به روش فیبرهای نوری، توانسته اند به تشخیص هر چه دقیق‌تر کمک کنند. این دستگاه دارای نهایت دقت، صحت و حفظ امنیت بیمار بوده و دارای قیمتی مناسب است. شرکت KaWe یکی از بزرگترین شرکتهای تولید لارنگوسکوپ در دنیا می‌باشد.



KaWe C

REF 03.51022.002

- یک دسته به همراه ۳ تیغه (مخصوص بزرگسالان)
- ست لارنگوسکوپ سه تیغه مخصوص بزرگسالان دارای تیغه‌های Mac3 , Mac2 , Mac4
- دارای دسته با اندازه متوسط
- دارای باتری قلمی در دسته



KaWe F.O

FO XL REF 03.62022.002

- یک دسته به همراه ۳ تیغه (مخصوص بزرگسالان)
- ست لارنگوسکوپ سه تیغه مخصوص بزرگسالان دارای تیغه‌های Mac3 , Mac2 , Mac4
- دارای لامپ زنون با ویژگی‌های انتقال نور با استفاده از فیبرهای نوری
- دارای دسته با اندازه متوسط
- دارای باتری قلمی در دسته

KaWe F.O

FO XL REF:03.62020.011

- یک دسته به همراه ۳ تیغه (مخصوص بزرگسالان)
- ست لارنگوسکوپ سه تیغه مخصوص بزرگسالان دارای تیغه‌های Mac3 , Mac2 , Mac4
- دارای لامپ زنون با ویژگی انتقال نور با استفاده از فیبرهای نوری
- دارای دسته با اندازه متوسط

FO XL REF:03.62720.011

یک دسته به همراه ۳ تیغه (مخصوص اطفال)

- ست لارنگوسکوپ سه تیغه مخصوص اطفال
- دارای تیغه‌های Mill 0, Mac1, Mac2



FO XL REF:03.62125.011

یک دسته به همراه ۳ تیغه (مخصوص نوزادان)

- ست لارنگوسکوپ سه تیغه مخصوص نوزادان دارای تیغه‌های Mill 00 , Mill0 , Mill1

KaWe COMBLIGHT F.O.30LED/E36 (EU) 3,5V

اتوسکوپ مدل KAWE COMBLIGHT F.O 30 LED

- لامپ LED با قدرت زیاد
- قدرت روشنایی بالا
- با قدرت بزرگنمایی 3X به منظور افزایش دقت و صحت تشخیص ویژگی‌های دسته دستگاه
- قابلیت اتصال با کلیک
- قابلیت تنظیم نور
- اندازه متوسط
- دارای باتری در دسته دستگاه با قابلیت شارژ با مدل KaWe MedCenter 4000



FO LED REF 02.28014.002




افتالموسکوپ مدل KAWE EUROLIGHT E36

- لامپ زنون / هالوژن
- ۶ دیافراگم
- فیلتر سبز رنگ
- قدرت روشنایی بالا
- قابلیت تنظیم لنز از ۲۰ تا +۲۰ درجه
- دارای لنز مناسب به منظور افزایش وضوح تصویر و تشخیص صحیح

لوازم جانبی

- دارای پروپ های یکبار مصرف برای گوش در اندازه های ۵X۲/۵mm - ۵X۴mm
- به همراه جعبه ی سخت
- آینه مستقیم برای دیدن درون حنجره به منظور تشخیص بهتر و راحت تر
- لامپ زنون یک
- لامپ زنون / هالوژن یک
- مجهز به لامپ معاینه بینی
- لامپ Fineoff XL

KaWe
MEGALIGHT Miller F.O.

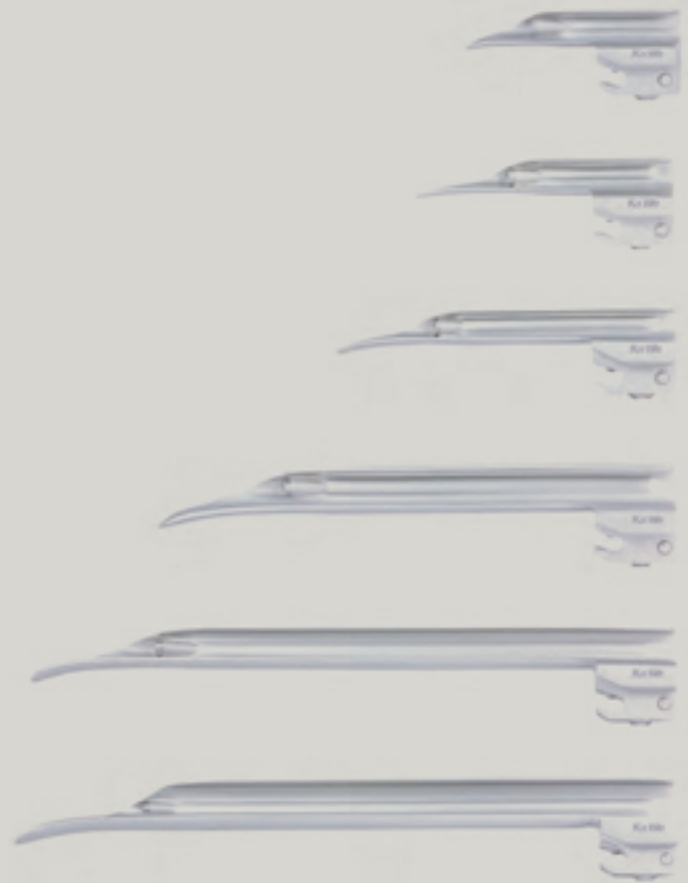

24




\varnothing 4 mm
 Macintosh F.O.
 Miller F.O.
 Foregger F.O.
 TEPRO® Macintosh F.O.
 Polio Macintosh F.O.



\varnothing 5 mm
 Einmal-Spatel, Metall
 Disposable blades, metal



\varnothing 3 mm
 Economy Macintosh F.O.
 Economy Miller F.O.

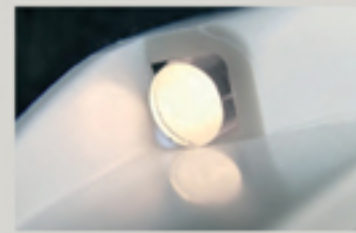

ca. approx.
 \varnothing 4,9-5,7 mm
 Einmal-Spatel, Kunststoff
 Disposable blades, plastic



\varnothing 3 mm
 KaWe MEGALIGHT®
 Miller F.O.



\varnothing 7 mm
 \rightarrow 3 mm
 KaWe MEGALIGHT®
 FLAPLIGHT® F.O.
 KaWe MEGALIGHT®
 Macintosh F.O.

KaWe
Economy Macintosh F.O.



KaWe
FLAPLIGHT F.O.



KaWe
Macintosh C



23

KaWe MASTERLIGHT

مدل پایه‌دار



- دارای لامپ هالوژن ۱۲ V با توان ۳۵W
- شدت تابش فوق العاده ۴۴۰۰۰ Lux (در فاصله ۰٫۴m)
- چراغ هالوژن با طول عمر زیاد: ۱۰۰۰h
- دارای دو شاخه با آداپتور • طراحی باریک، زیبا و امروزی
- قابل انعطاف با طول ۱٫۵m قابل چرخش
- ساخته شده از استیل ضد زنگ با بهترین کیفیت
- نور نقطه ای بسیار دقیق، استفاده آسان، با قابلیت تنظیم بی نهایت
- منبع ولتاژ: ۲۳۰V • زاویه ی بازتابش ۸ درجه
- استفاده آسان • میزان گرمی رنگ تابشی ۳۲۰۰k
- دارای ۵ چرخ دوتایی با جابجایی آسان:
- ۲ چرخ ترمز، ۱ چرخ برای جلوگیری از اثرات الکتریسیته ساکن و ایجاد بهترین نور،
- ۲ چرخ نرمال برای جابه جایی راحت

REF:10.90100.002

HL REF:10.11010.002

اطلاعات فنی

- اندازه نور نقطه ای ۱۰۰mm در فاصله ی ۰٫۵m
- بهترین بازه عملکرد ۱۲۵mm در فاصله ی ۰٫۵m
- بیشترین ارتفاع: ۲۱۱cm
- بیشترین ناحیه عملکرد: ۱۷۰cm
- ارتفاع استند فلزی: ۹۷٫۵cm
- اندازه پایه های استیل: ۳۰cm
- وزن: ۴٫۷kg
- لامپ هالوژن یدکی ساخته شده دارای محافظ با کیفیت بالا عمر ۱۰۰۰h و زاویه بازتابش ۸ درجه

- دارای لامپ LED با توان 7W
- طول عمر چراغ LED: 50000h
- شدت تابش بالا (7500Lux) (فاصله ی 0.4)
- دارای دو شاخه با آداپتور • طراحی باریک، زیبا و امروزی
- قابل انعطاف با طول 1.5 ، قابل چرخش و ساخته شده از استیل ضد زنگ با بهترین کیفیت
- نور نقطه ای بسیار دقیق، استفاده آسان، با قابلیت تنظیم بی نهایت
- زاویه بازتابش ۲۴ درجه • منبع ولتاژ: 50-60Hz/10-240v
- استفاده آسان • میزان گرمی رنگ تابشی: 2700K
- دارای ۵ چرخ دو تایی با جا به جایی آسان: ۲ چرخ ترمز، ۱ چرخ برای جلوگیری از ایجاد اثرات الکتریسیته ساکن
- به منظور تولید نور با بهترین تابش، ۲ چرخ نرمال برای جا به جایی راحت

REF:10.90120.002

LED REF:10.11020.002

اطلاعات فنی

- اندازه نور نقطه ای ۱۰۰mm در فاصله ی ۰٫۵m
- بهترین بازه عملکرد ۱۲۵mm در فاصله ۰٫۵m
- LED یدکی 7W با زاویه بازتاب ۲۴ درجه
- بیشترین ارتفاع: ۲۱۱cm
- بیشترین ناحیه عملکرد: ۱۷۰cm
- ارتفاع استند فلزی: ۹۷٫۵cm
- اندازه پایه های استیل: ۳۰cm
- وزن: ۴٫۷kg

چراغ معاینه

MASTERLIGHT

چراغ های معاینه KaWe با بهره گیری از تکنولوژی تابشی منحصر به فرد خود تاثیر به سزایی در بررسی ساختار بافت بدن توسط متخصص دارد و با استفاده از آنها می توان با معاینه کامل به تشخیص صحیح و به موقع رسید. چراغ های معاینه یکی از مهمترین بخشهای خط تولید کمپانی KaWe هستند. این تولیدات دارای دقت و تمرکز بالا بوده و نور آنها بسته به نیاز کاربر قابل تنظیم است. موقعیت و ارتفاع چراغ نیز در هنگام معاینه قابل تغییر بوده و در نتیجه جزئیات مربوط به هر بافت قابل دیدن می باشد. علاوه بر وجود لامپهای هالوژن در مدل MASTERLIGHT ، چراغهای LED با تکنولوژی منحصر به فرد خود نیز موجود می باشند. این لامپ ها علاوه بر ویژگی های لامپهای هالوژن دارای تابش یدون اشعه مادون قرمز با عمر طولانی هستند. LED ها بهترین کنتراست را برای تشخیص پزشک فراهم می آورند.

KaWe MASTER LIGHT

چراغ معاینه



پایه رومیزی

REF 10.90301.001

HL لامپ هالوژن

- توان ۳۵W/۱۲V
- لامپ هالوژن
- مشکی رنگ
- دارای منحنی طاقی شکل
- قابل نصب به پایه دیواری و رومیزی
- دارای دو شاخه با آداپتور

REF 10.12010.002



پایه دیواری

REF 10.90301.001


LED لامپ LED

- توان (قسمت بالایی چراغ) 7W
- دارای لامپ LED، این لامپ نسبت به مدل بالا، ۸۰٪ بیشتر در مصرف انرژی صرفه جویی می کند.
- مشکی رنگ
- دارای منحنی طاقی شکل
- قابل نصب به پایه دیواری و رومیزی
- دارای دو شاخه با آداپتور

REF:10.12020.002



این لامپ ها دارای چراغ LED و طراحی منحصر به فرد، امروزی و ارگونومیک هستند. نورهای سفید به کار رفته در این لامپ‌ها برای کمک به انواع تشخیص‌ها از جمله دندانپزشکی، گوش، حلق، بینی و سایر حوزه‌های مرتبط مناسب بوده و با پوشش اپتیکی خاص به کار رفته در این دستگاه، بهترین تابش و کمترین گرما را تولید می‌کنند. گستره‌ی عملکرد نور، زاویه تابش و سایز هدبند قابل تنظیم توسط کاربر است. این دستگاه همچنین قابلیت نصب نوعی از ذره بین‌های چشمی را بر روی خود دارا می‌باشد.

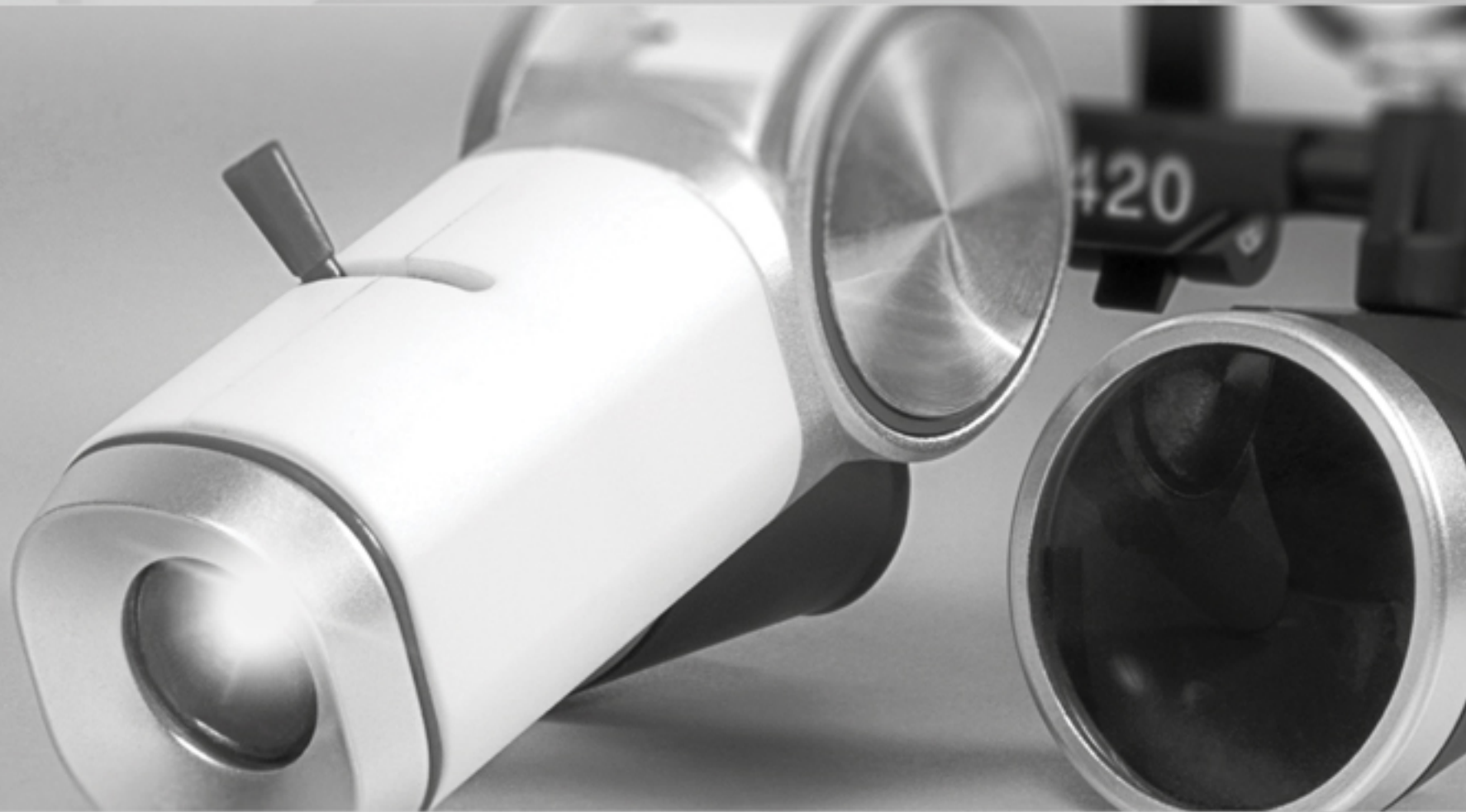

KaWe MASTERLIGHT LED

استیل ضد زنگ

- طول 1.5m دارای پایه همراه ساخته شده از استیل ضد زنگ با کیفیت بالا
- دارای دکمه روشن و خاموش کردن بر روی بدنه چراغ
- کم مصرف

LED REF:10.71011.002

اطلاعات فنی

- تعداد لامپهای LED
- میزان گرمی رنگ تابشی: 4000K
- قابلیت تفکیک رنگ بازتابی فوق العاده با CRI: 95
- افزایش دما در نزدیکی سر دستگاه: 0.5 درجه
- دارای لامپ با عمر طولانی و بیشتر از 5000h
- قطر چراغ: 12cm
- مصرف کلی برق: 7W
- فاصله عملکرد: 20-80cm
- گستره تنظیم ارتفاع: 60cm
- منبع قدرت: 150-240V, 50-60Hz
- رنگ پایه‌ها: ابریشمی مات
- وزن: 5Kg
- شدت نور زیاد تابشی تا فاصله 0.5m با قدرت 3000Lux
- اندازه نور نقطه ای: 10cm
- دارای 2 شاخه با آداپتور



KaWe EXAMINATION LAMPS LED

- دارای بیشترین قدرت تابش تا 45000Lux
- دارای طول 1.5m
- دارای روکش پلی استر، دارای استند همراه
- کلید روشن و خاموش روی بدنه چراغ
- امکان کنترل الکتریکی روشنایی
- صرفه جو در مصرف انرژی

LED REF:10.11020.002

اطلاعات فنی

- تعداد چراغ های LED: 12
- قابلیت تفکیک رنگ بازتابی فوق العاده با CRI: 95
- میزان گرمی رنگ تابشی: 4300K
- افزایش دما نزدیک بالای چراغ: 0.5C
- امکان کنترل روشنایی به شکل الکترونیکی و از روی بدنه چراغ: 50 تا 100 درصد
- دارای لامپ با عمر طولانی و بیشتر از 50000h
- قطر چراغ: 29cm
- کل مصرف برق: 18W
- فاصله عملکرد: 14cm تا 70cm
- گستره تنظیم ارتفاع: 121cm
- منبع قدرت: 230V, 50Hz
- رنگ: ابریشمی مات
- دارای دو شاخه با آداپتور
- وزن: 11kg
- مدل 18 وات فوکوس REF:10.71021.102
- میزان شدت تابش در فاصله یک متری 45000Lux
- اندازه نور نقطه ای: 14-25cm
- مدل 18 وات REF:10.71021.002
- میزان شدت تابش در فاصله یک متری 35000Lux
- اندازه نور نقطه ای: 17cm



KaWe SPARE PARTS شارژر مربوط به دستگاه‌های تولیدی

این دستگاه که به نام MedCharge 4000 معروف است برای شارژر مدل‌های PICCOLI-GHT,EUROLIGHT و باتری‌های کوچک نوع AA و باتری متوسط نوع C به کار رفته در دسته لارنگوسکوپ‌های تولیدی استفاده می‌شود. اما در مدل‌هایی مانند LED2.5V و دسته‌هایی که دارای کابل شارژ هستند استفاده از این وسیله امکان پذیر نمی‌باشد. مدت زمان مورد نیاز برای شارژ دستگاه‌هایی با اندازه متوسط، ۳ ساعت و برای دستگاه‌هایی با اندازه کوچک، ۲ ساعت می‌باشد، این زمان‌ها بسته به نوع لامپ به کار رفته در دستگاه متفاوت هستند.

KaWe CHARGING STATION



● قابل استفاده برای هر دو نوع دسته ۲/۵V و ۳/۵V
 ● با قابلیت کنترل هوشمند
 ● دارای هر سه کابل برق US110V, GB240V, EU240V در یک دستگاه
 ● دارای دو جای شارژ برای دسته‌های AA
 ● قابل نصب بر روی دیوار به همراه لوازم مربوطه
REF:12.80220.722

مشخصات فنی:

- ولتاژ ورودی: ۱۰۰-۲۰۰V-۵۰Hz
- بیشترین قدرت: ۱٫۲۸
- بیشترین ظرفیت شارژ: ۴۵۰۰mAh و کمترین ظرفیت: ۲۵۰Mah
- ولتاژ خروجی دستگاه در حالت استند بای کمتر از ۹VDC
- میزان ولتاژ خروجی عملکرد دستگاه: ۲*۶VCD
- میزان جریان خروجی عملکرد دستگاه (related voltage): ۲*۲۵mA/±۱۰%
- شارژ و پاور: ۱۰-۳۰Ma
- دمای کارکرد: ۰C-۴۰
- دمای ذخیره: ۰C-۲۵ - ۱۱: درجه حفاظت



KaWe RECHARGEABLE BATTERY (FOR THE KAWE MEDCHARGE 4000)


- دارای عمر طولانی، انرژی زیاد و ماندگاری در مدت زمان بالا
- مدت زمان شارژ: 8-10h
- گنجایش: 2200Mah

REF:12.80220.722



- باتری قابل شارژ
- غیر قابل استفاده در اتوسکوپ‌ها با چراغ LED و لارینگوسکوپ با چراغ LED 2.5V
- مدت زمان شارژ: 14h
- گنجایش: 3000mAh

REF:12.80110.722

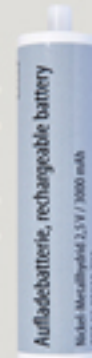

KaWe KAWE HEADLAMP LED-800 LED

● قابلیت شارژ با یک باتری متصل به دستگاه بر روی سرو یک باتری با قابلیت شارژ با کابل مشخصات فنی:

- لامپ LED با عمر طولانی: ۵۰۰۰h
- قابلیت تنظیم در ۵ سطح روشنایی
- میزان تنظیم نور نقطه ای در فاصله ۱۱۰mm-۶۰:۲۵۰mm
- میزان تنظیم نور نقطه ای در فاصله ۲۴۰mm-۱۲۰:۵۰۰mm
- میزان زمان لازم برای شارژ باتری متصل شده بر روی هدبند: ۳h
- میزان زمان لازم برای شارژ باتری متصل شده بر روی هدبند: ۶h
- میزان قدرت روشنایی برای نقطه ای با قطر ۵۵mm در فاصله ۳۰cm با بهترین فوکوس: ۷,۷۰۰Lux
- عمر باتری قابل شارژ متصل به هدبند: ۱۲h
- عمر باتری قابل شارژ متصل به کمر: ۲۴h
- وزن بدون باتری قابل شارژ: ۱۶۰g
- گارانتی ۲۴ ماه پس از خرید
- ولتاژ شارژر: ۱۰۰-۲۴۰V
- قدرت LEDها: ۳W
- ولتاژ باتری قابل شارژ: ۸,۴V



- دارای لامپ پیشانی
- دارای کابل شارژ با آداپتور
- باتری قابل شارژ پیشانی
- باتری قابل شارژ کمری با کابل اتصال

REF:12.89312.312

- دارای لامپ پیشانی
- دارای کابل شارژ با آداپتور
- باتری قابل شارژ کمری با کابل اتصال

REF:12.89311.212

- دارای لامپ پیشانی
- دارای کابل شارژ با آداپتور
- باتری قابل شارژ پیشانی

REF:12.89310.112

KaWe DIAGNOSTIC LIGHTS

چراغ معاینه قلمی

- ساخته شده از فلز، در رنگ‌های مختلف
- شامل دو باتری قابل تعویض ۱٫۵V
- بسته بندی شده درون بسته‌های پلاستیکی برآمده
- سطوح نرم و صاف با طول: ۱۳cm



REF: 12.05211.004

REF: 12.05401.024

REF: 12.05201.024

REF: 12.05100.071

BINOCULAR MAGNIFYING GLASSES SEPRATE Eینک بزرگنمایی BC 2,5 & 3,5

- دارای بزرگنمایی‌های مختلف در فواصل گوناگون
- دارای بدنه پلاستیکی و چشمی‌های شیشه‌ای
- قابل نصب بر روی هدبند



2/5 x 340 mm REF:12.89342.342

3/5 x 340 mm REF:12.89343.342

2/5 x 420 mm REF:12.89342.422

3/5 x 420 mm REF:12.89343.422

BINOCULAR MAGNIFYING GLASSES BC 2,3 به همراه فریم مدل کلاسیک با بزرگنمایی ۲,۳

- قابلیت تنظیم طول دسته‌ها در گستره ۱۲۵ تا ۱۵۰mm (ضد لغزش)
- اسپری پاک‌کننده ۲۵ml (محلول الکل و حلال آنتی‌استاتیک با خاصیت پاک‌کننده قوی)
- پوشش میکروفیبری
- وزن: ۴۰g
- دارای کیف مخصوص حمل



REF:13.10321.302